

欲しかったのは、

手の届く共焦点



精緻の蛍光美を身近に

共焦点レーザー顕微鏡

ライカ TCS SPE

キャンペーン価格

Visible仕様

¥11,000,000- (税別)

キャンペーン期間: 2007年12月末弊社受注分まで

*Leica*

MICROSYSTEMS

# Leica TCS SPE

共焦点レーザー顕微鏡

ライカ独自のプリズム分光光学系はそのままに、よりコンパクトにより使いやすさを追求。

## ■プリズム分光


プリズム分光方式が、高感度と高選択性を実現。試料に応じて任意にエミッション検出幅を設定、クロストークを最小限に抑え、SN比を向上できます。また、エミッション側を自由に可変させることができ、透過精度の落ちるフィルターがないため、試料の明るさを十分に捉えることができます。

## ■最大4レーザー搭載

Violet / 405nm を加え、4波長までのレーザーを同時搭載可能。各レーザー波長による多重蛍光イメージングが容易かつ高精度に行えます。また固体レーザーなので、システム起動後すぐにイメージングが行えます。

## ■省スペース 省電力

固体(Diode)レーザーを採用することにより、コンパクトかつ低電力(100V 8A)を実現しました。

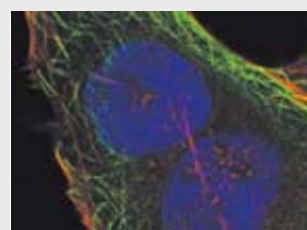

## パッケージ内容

対応顕微鏡	正立顕微鏡 DM2500	Diodeレーザー	488nm(15mW)
対物レンズ	10x、40x、63xoil		532nm(15mW)
Zドライブ	スーパーZガルパノ ステージ		635nm(15mW)
検出器	蛍光1チャンネル 透過1チャンネル(オプション)	ソフトウェア	405nm(25mW)* *Violet仕様のみ イメージング用ソフトウェア x 1 三次元再構築ソフトウェア x 1 ダイファインダーソフトウェア x 1

## キャンペーン価格

Visible仕様  
¥11,000,000- (税別)

Violet+Visible仕様  
¥13,200,000- (税別)

## ライカ マイクロシステムズ 株式会社

本社 〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル6F  
大阪セールスオフィス 〒531-0072 大阪市北区豊崎5-4-9 商業第2ビル10F  
名古屋セールスオフィス 〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-20 三永伏見ビル2F  
福岡セールスオフィス 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル12F

Tel.03-5421-2813 Fax.03-5421-2891  
Tel.06-6374-9771 Fax.06-6374-9772  
Tel.052-222-3939 Fax.052-222-3784  
Tel.092-282-9771 Fax.092-282-9772

**Leica**  
MICROSYSTEMS

● <http://www.leica-microsystems.co.jp> E-mail: [marketing@leica-microsystems.co.jp](mailto:marketing@leica-microsystems.co.jp)

※この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。