


From Eye to Insight



LEISTUNG BEI INSPEKTIONEN

Mikroskoplösungen unterstützt durch die Enersight Softwareplattform



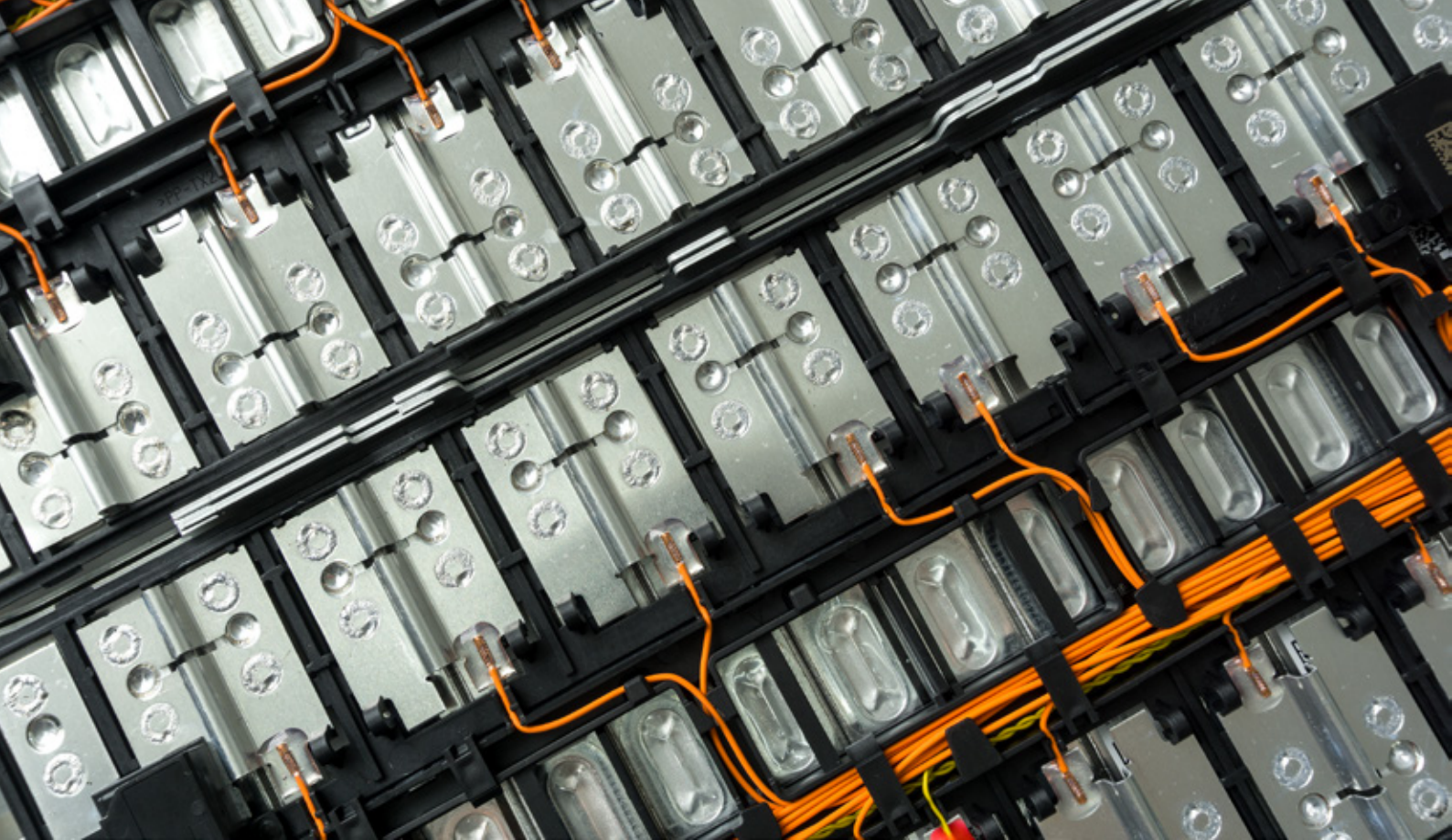

Elektronikindustrie



Automobilindustrie



Medizinprodukte

Inspektionsmikroskoplösungen unterstützt durch die Enersight Softwareplattform

Bei Inspektion und Nachbearbeitung sind Effizienz und Zuverlässigkeit entscheidend. Die Auswahl der optimalen Lösung für Ihre Anforderungen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören zum Beispiel die Art der Proben, die Anzahl der Personen, die an den Mikroskopen arbeiten werden, und die Häufigkeit der Verwendung.

Leica Microsystems bietet eine breite Palette von Produkten für die Inspektion, die die konsistente und intuitive Enersight Softwareplattform nutzen, sodass alle Mikroskoplösungen eine gemeinsame Oberfläche haben. So können Sie unabhängig vom Betriebsmodus Ihre Prozesse optimieren und konsistente und verlässliche Ergebnisse sicherstellen.


ENERSIGHT SOFTWAREPLATFORM

Optimieren Sie Ihre Inspektionsabläufe: Die integrierte All-in-One-Softwarelösung Enersight erleichtert den Vergleich, die Messung und das Teilen von Daten. So steigern Sie Ihre Effizienz bei Inspektionsaufgaben.

Inspektion mit einem einzigen System

Messung direkt bei der Sichtprüfung – auch ohne PC


- > Messen Sie unterwegs mit einer Software, die auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.
- > Messen Sie mehrere Probenmerkmale im Livebild und speichern die Ergebnisse zusammen mit dem Bild.
- > Mehr Funktionalität mit dem Messwerkzeug, das Messungen zwischen zwei beliebigen Punkten ermöglicht.
- > Snap-to-Edge-Unterstützung für genaue Messungen.

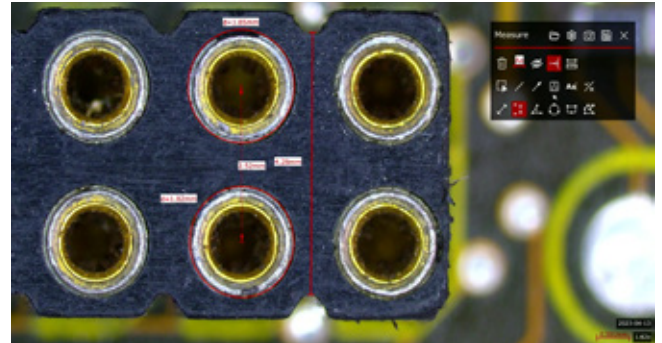

Messungen mit integrierter On-Screen-Anzeige (OSD).

Direkter Vergleich mit Referenzen mit nur einem Klick

- > Mühelose Gutteil/Schlechtteil-Entscheidungen durch direkten Vergleich des Livebilds mit Referenzbildern oder benutzerdefinierten Overlays.
- > Beurteilen Sie, ob Ihre Probe außerhalb der Spezifikation liegt, indem Sie Toleranzlinien auf dem Bild überlagern.

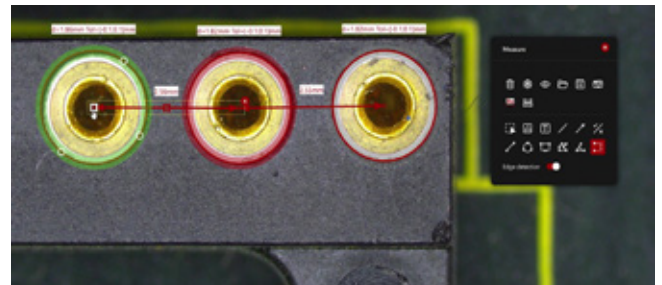


Sehen Sie anhand von Toleranzlinien (grüne und rote Kreise) schnell, ob die Proben die Spezifikationen erfüllen.

Deutlichere Erkennung von Mängeln

Kontrastreichere Live-Bilder mit HDR: Erfassen Sie Details in hellen und dunklen Bereichen Ihrer Probe in einer einzigen Aufnahme während der Live-Bildgebung mit hohem Dynamikbereich (HDR).

Hervorheben schwer erkennbarer Details: Untersuchen Sie Proben gründlicher, auch solche mit transparenten und reflektierenden, undurchsichtigen Bereichen, indem Sie die Bildfarbe invertieren.

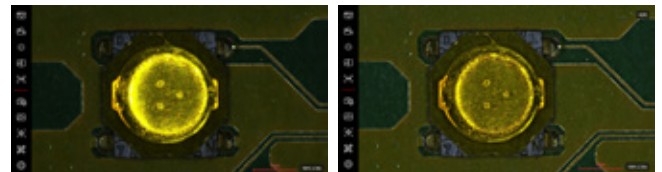

Links: Abbildung eines elektronischen Bauteils ohne HDR
Rechts: Abbildung eines elektronischen Bauteils mit HDR

Verbesserte Kommunikation für schnelle Entscheidungen

- > Beschriften Sie Ihre Bilder mit oder ohne PC, beispielsweise mit fortlaufenden Nummern zur Hervorhebung von Probeneigenschaften.
- > Speichern Sie Bilder automatisch und schnell in Ihrem Netzwerk.
- > Teilen Sie Ergebnisse und Dokumentationen einfach per E-Mail.
- > Minimieren Sie das Risiko von Datenverlusten, indem Sie Ihre Daten sicher in Ihrem lokalen Netzwerk speichern und so teilen und sofort auf sie zugreifen können.



Mit Enersight können Sie Anmerkungen und Schlussfolgerungen zu Ihrer Probe einfach ergänzen.

Einfacher Zugriff auf Bilder für alle: Alle Mitglieder in Ihrem Team können Enersight intuitiv nutzen, um während der Inspektion Bilder zu erstellen. Dies verringert den Zeitaufwand für Schulungen und Betreuung.

Einfache Bedienung – für jeden entwickelt


Sparen Sie Zeit- und Arbeitsaufwand – die Nutzung der Enersight Plattform ist unabhängig von Vorkenntnissen mit minimalem Schulungsaufwand möglich.

Vereinfachte Bedienung mit anpassbarer Benutzeroberfläche

- > Blenden Sie nicht benötigte Funktionen aus
- > Halten Sie die Benutzeroberfläche so einfach wie möglich

Individualisierbar für jede Benutzergruppe


- > Beschränken Sie den Benutzerzugriff auf bestimmte Funktionen

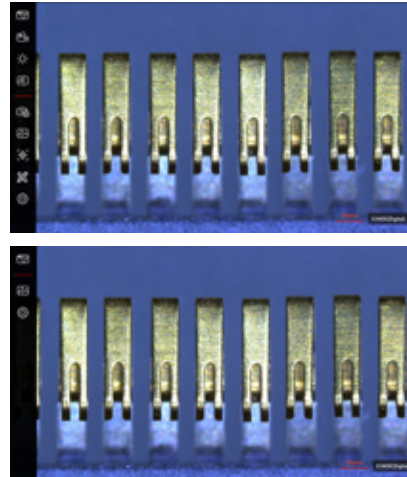

Oben: Vollständige Benutzeroberfläche/
Unten: Benutzerdefinierte Benutzeroberfläche

Einheitliche Nutzung, die Zeit spart

- > Führen Sie Ihre Inspektionen einheitlich durch, ohne dabei von dem verwendeten Leica Produkt oder Betriebsmodus abhängig zu sein.
- > Da die Benutzeroberfläche in den verschiedenen Betriebsmodi gleich ist, kann der Schulungs- und Betreuungsbedarf innerhalb Ihres Teams reduziert werden.

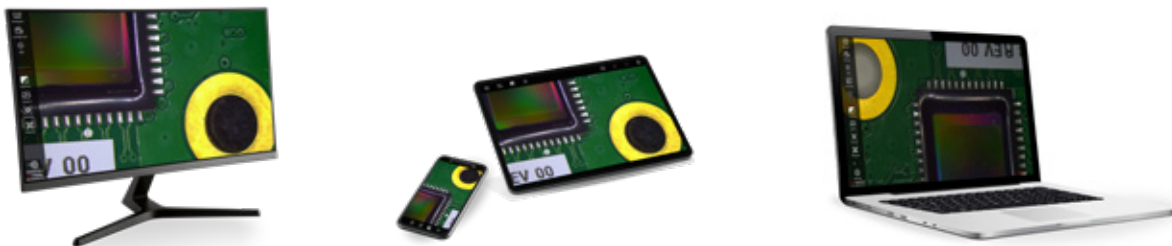

Die Enersight Software kann direkt an einem Monitor oder mit einem Mobilgerät bedient werden.


Produzieren Sie Bilder wie ein Profi

Klare Bilder mit weniger manuellem Aufwand

- > Sparen Sie insbesondere bei reflektierenden Proben Zeit, da Sie den Weißabgleich und die Belichtungszeit nicht mehr manuell einstellen müssen.
- > Durch die integrierten Hilfsfunktionen können Sie von den für Sie interessanten Bereichen ausgewogene Bilder mit starkem Kontrast erstellen.
- > Erfassen Sie Bilder schnell und mühelos mit der automatischen Anpassung der Kameraeinstellungen.

Erhalten Sie Hilfe bei der Bildoptimierung

- > Verwenden Sie die Informationen auf dem Bildschirm, um den maximalen Fokus zu überprüfen.
- > Finden Sie die richtigen Beleuchtungseinstellungen, indem Sie die Bildhelligkeit mit einem Histogramm überprüfen.

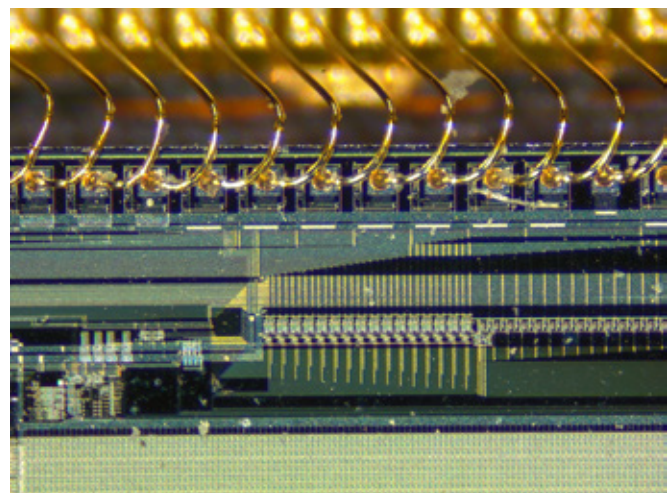

FINDEN SIE IHRE INSPEKTIONSLÖSUNG

Für Ihre spezifischen Anforderungen sind spezielle Konfigurationen verfügbar – alle mit Unterstützung der Enersight Software.

Digitalmikroskop Emspira 3

Das Emspira 3 ist ein Digitalmikroskop, das keine Okulare hat, sondern das Livebild direkt an einem Monitor anzeigt. Es kombiniert in einem einzigen System alles, was Sie für umfassende visuelle Inspektionen benötigen, einschließlich Vergleich und Messung, sowie die direkte Weitergabe von Dokumentationen über ein Netzwerk. Das kompakte und vielseitige Mikroskop inspiriert die einfache Inspektion, indem es Ihnen schlanke Prozesse ermöglicht, Ihre Anforderungen flexibel abdeckt und Ihnen eine vertrauenswürdige und zuverlässige Arbeitsweise ermöglicht.



Das Digitalmikroskop Emspira 3 wird mit der On-Screen-Display (OSD) Version der Enersight Softwareplattform betrieben.

Ivesta 3 Greenough Stereomikroskope

Zur Optimierung von Inspektion und Nachbearbeitung. Für Aufgaben, die eine 3D-Ansicht der Probe erfordern, ermöglichen die Okulare dank FusionOptics eine optimale 3D-Darstellung. Außerdem ist es angenehm, die Proben mit dem großen Arbeitsabstand des Mikroskops zu bearbeiten. So benötigen Sie weniger Zeit, um das Mikroskop einzustellen, und können sich besser auf Ihre Arbeit konzentrieren. Mit dem Ivesta 3 Greenough Stereomikroskop können Sie reproduzierbare Ergebnisse erzielen und das Risiko menschlicher Fehler verringern.

Ivesta 3

Nur für Inspektion und Nachbearbeitung, keine Kamera zur Dokumentation erforderlich.



Ivesta 3 (C-Mount)

Mit Kameraadapter: Gibt Ihnen die Flexibilität, bei Bedarf eine Kamera anzuschließen und so zu einem Digitalmikroskop umzurüsten.



Ivesta 3 (Integrierte Kamera)

Mit integrierter Kamera: Zur direkten digitalen Übertragung von Bildern an verschiedene Geräte, z. B. Monitor, Mobilgerät oder Computer.



FINDEN SIE IHRE INSPEKTIONS-LÖSUNG

Stereomikroskope der Serie M für Routineaufgaben

Nutzen Sie die vielseitigen Messfunktionen des Stereomikroskops der Serie M in Kombination mit der Enersight Softwareplattform. Untersuchen, analysieren, dokumentieren und arbeiten Sie bequem mit den Stereomikroskopen M50, M60 und M80 für Routineaufgaben. Sie können das Mikroskop mit vielen ergonomischen Zubehörteilen und mehreren Beleuchtungsarten an Ihre Anforderungen anpassen.



M60 Stereomikroskop mit Kamera Flexacam c5 und der On-Screen-Anzeige (OSD) der Enersight Softwareplattform.

Lichtmikroskop DM2700 M

Wenn Sie die innere Struktur eines Materials untersuchen möchten, können Sie Ihre Arbeitsabläufe mit dem Lichtmikroskop DM2700 M und der Enersight Softwareplattform optimieren. Nutzen Sie diese Lösung für alle Routineaufgaben der Materialanalyse.



Das Lichtmikroskop DM2700 M mit der Flexacam c5 Kamera und der Desktop App der Enersight Softwareplattform.

MIKROSKOPKAMERAS

Mit den Mikroskopkameras Flexacam c5 und i5 können Sie effizient Einblicke in die Proben gewinnen und scharfe Bilder mit feinen Details und präziser Farbwiedergabe nutzen. Darüber hinaus können Sie flexibel entsprechend Ihren Anforderungen arbeiten und Teamentscheidungen mithilfe einer der Kameraoptionen einfacher treffen. Die Mikroskopkameras können über die einheitliche Benutzeroberfläche der Enersight Softwareplattform bedient werden. Dabei spielt der Betriebsmodus, z. B. Computer, Monitor oder Mobilgerät, keine Rolle.

Mikroskopkamera Flexacam c5

Für die Kameramontage an einem Stereo- oder Lichtmikroskop.



Kamera Flexacam c5 mit M60 Stereomikroskop und Desktop App der Enersight Softwareplattform.

Mikroskopkamera Flexacam i5

Für den Einsatz zwischen den Optikträgern und dem Binokulartubus eines Stereo- oder Lichtmikroskops.




Kamera Flexacam i5 mit M50 Stereomikroskop und Enersight Mobile App.

Energisight bietet die folgenden Betriebsmodi

Eigenschaften	Energisight OSD	Energisight Mobile	Energisight Desktop
Bedienung			
Gemeinsame Schnittstelle zur Verwendung mit mehreren Betriebsmodi	x	x	x
Vereinfachte Bedienung mit anpassbarer Benutzeroberfläche	x	x	x
Anpassbar für jede Benutzergruppe (Nutzerverwaltung)	x	—	x
Automatische Anpassung der Kameraeinstellungen	x	x	x
Bildaufnahme			
Fokus-Feedback: Unterstützung beim Erreichen des maximalen Fokusniveaus	x	—	x
Histogramm mit Helligkeitsdaten zur Optimierung der Beleuchtung	x	—	x
Dokumentation			
Bild- und Videoaufzeichnung, Galerie	x	x	x
	x	x	x
Speichern von Bildern in einem Netzwerk	(automatisches Speichern)	(manuelles Speichern)	(automatisches Speichern)
	x	x	x
Ergebnisse per E-Mail teilen		(manuell)	(manuell)
Bilder kommentieren	x	x	x
Fortlaufende Nummerierung der Probandendetails	x	x	x
Messung			
Messung unmittelbar während der Inspektion	x	x	x
Direkter Vergleich mit Referenzbildern oder Overlays mit Toleranzen	x	—	x
Snap-to-Edge-Unterstützung für kreisförmige Messungen (in der OSD „Kantenerkennung“)	x	—	x
HDR für höhere Kontraste, besser ausbalancierte Live-Bilder	x	—	x
Negativ-Invertierung zum Hervorheben schwer erkennbarer Details	x	x	x
Allgemein			
Allgemeine Einstellungen	x	x	x

x = enthalten, — = nicht verfügbar

KONTAKTIEREN
SIE UNS!

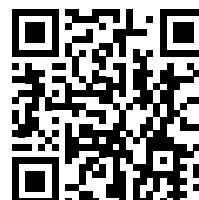

Leica Microsystems GmbH | Ernst-Leitz-Straße 17–37 | 35578 Wetzlar
Tel. +49 6441 29-40 00 | Fax +49 6441 29-41 55

www.leica-microsystems.com/de